


STRADIS_{MED}


Steriles Schweißgerät TCD®

Sterile Verbindung von Schläuchen

Einfach, ökonomisch und zuverlässig

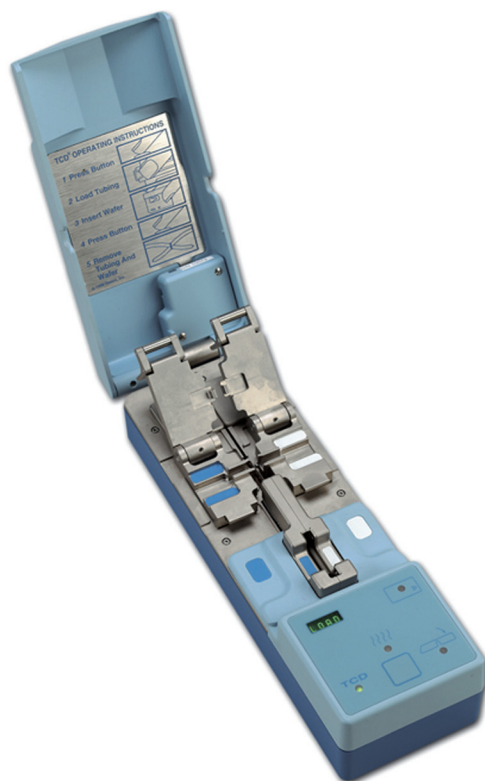

GENESIS BPS™



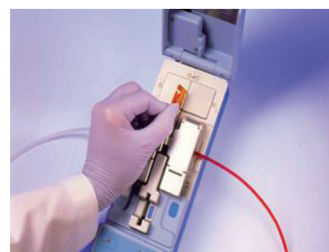


- Ein-Knopf-Bedienung
- Einfache Display Anzeige
- Klein und platzsparend
- Einzel-Klingen-Ladung – kein Stau/Blockierung
- Nass zu Nass / Nass zu Trocken / Trocken zu Trocken
- Keine Schlauchverschiebung – exakte präzise Schweißnaht

STRADIS-MED GmbH
Wooogstrasse 48
D-63329 Egelsbach
Amtsgericht Offenbach HRB 42891
Office: +49 6103 70 64 22
Fax: +49 6103 70 64 229
info@stradis-med.de
www.stradis-med.de

STRADIS_{MED}

Die einzigartige Methode der Schlauchknickung beim Einlegen der Schläuche vor dem Schweißvorgang ermöglicht ein vorsichtiges Wegpressen der Blutes an der Schweißstelle.

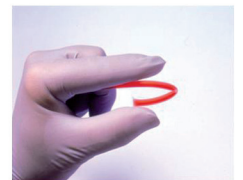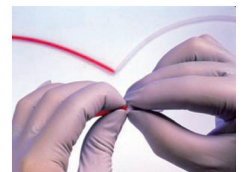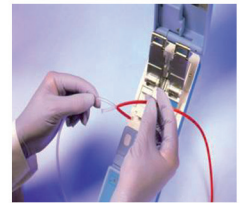

Tamper Lock™ ladender Mechanismus sichert das leichte Schlaucheinlegen und die genaue Anordnung der Schläuche.

Schlauchklammern halten die Schläuche sicher an der Position und verhindern eine Schlauchverschiebung.

Farbcodierung für die korrekte Position der Klinge

Anzeige und Bedienfeld zur Überwachung und Bedienung

Kurzbedienungsanleitung

Schlauchklappen

Rechter Schlauchhalter

Vertikale Führung

Linker Schlauchhalter

Alphanumerisches Display

Leichte Ein-Knopf Bedienung

Artikel-Nr: 480-1245 TCD Gerät

Artikel-Nr: 480-1274 TCD Klingen (240/box)



Genesis BPS International sàrl
CP 2361 Nyon 2, Switzerland
Phone: + 41.22.363.18.16
Fax: + 41.22.363.18.17
international@genesisbps.com

STRADIS-MED GmbH
Wooogstrasse 48
D-63329 Egelsbach
Amtsgericht Offenbach
HRB 42891
Office: +49 6103 - 70 64 22
Fax: +49 6103 - 70 64 229
info@stradis-med.de
www.stradis-med.de